



Nutriconnnect sur PULSE

V1 – Jan 2024



Saisie du contrat M3

Pour les SAM

Saisie M3

- Dans M3, saisir un contrat spécifique pour la balance nutritic@nnect avec la NOM: **JB173**
- Faire remonter le contrat dans PULSE:

Pulse Santé - Manager

Menu Édition Facturation Développement

Prises en charge Enregistrées (Entrées) du 15/04/2023 au 15/05/2023

TYPES DE PRISES EN CHARGE

- ☒ Insulinothérapie
- ☒ Nutric@nnect
- ☒ Perfusion - Nutrition
- ☒ Respiratoire

CODE POSTAL

STATUT

- ☒ Pré-admission
- ☒ Admission
- ☒ Actif

AGENCE

Oxypharm Toulouse

Tableau de bord

Prises en charge

Planning

Prescrit le 15/05/2023 Enregistré le 15/05/2023 Code CZ66827 Statut Actif RA VA OP CV AM Sign. Q. Nom du patient GUERRINI Guy (M.) Traitements Respiratoire Oxygénothérapie ODYSP 3.30

Renouvellement

Importer depuis M3 Toulouse

Numéro de contrat*

CZ85106

Annuler Importer

Export des prescriptions

Importer depuis M3 Toulouse

Inconnu

DURIEZ VIRGINIE

SCHMIDT SANDRA

Oxygénothérapie ODYSP 3.30

ALLOU THIBAUT

MAI EEBEV JEAN

Importation du contrat

Importer depuis M3 Toulouse

Import du contrat CZ85106

Lecture du contrat CZ85106 auprès de M3

Création du patient H31442


Création de la prise en charge CZ85106

Association de la prise en charge au patient H31442

Création de la prescription

Génération de 1 rendez-vous

Association du produit PESE PERS CONNECT BODY PRO - 2300527355

 DU

CZ85106

Nutric@nnect

Annuler



Fermer

05/2023

15/05/2023

CZ75574

Actif



RIGO Napoleon (M.)

Respiratoire

Activer la prise en charge

Pulse Santé - Manager

Menu Édition Facturation Développement

DUMAS KYLIAN
CZ85106
Nutric@nnect

IDENTIFICATION

Type de prise en charge*
Nutric@nnect

Date d'admission*
15/05/2023

☒ Valider la prise en charge

Assignée à*
Non défini

Administratifs assignés

Commercial assigné

Programmer une date de rappel
Urgent Non conforme

Associer un compte client à facturer
Tarification du groupe client

Compte client à commissionner

ÉTAT CIVIL DU PATIENT

M. DUMAS KYLIAN

Date de naissance
19 08 2008

☐ Mettre à jour les informations d'adresse dans la fiche patient

Annuler Enregistrer

Activation du contrat dans PULSE en cochant valider la prise en charge

Renseigner les info balance sur PULSE



Nouveau !

Pulse Santé - Manager

Menu Édition Facturation Développement Aide

Pulse santé

AGENCE
Oxypharm Toulouse

Tableau de bord

Prises en charge

Planning

Commande

Logistique

Facturation

Comptes clients

Prise en charge

Admis le 07/11/2023
Né(e) le - (- ans)
Assignée à Maud Rico
Administratifs assignés : Hubert Cecylia
Commercial assigné : Morelle Léa
Créée le 07/11/2023 par Maud Rico

Coordonnées
41 BIS RUE D'ASSALIT
31500 TOULOUSE
0610102865
[Afficher plus d'infos](#)

Prescriptions Messagerie Interventions **Dispositifs** Bons de livraison Bons de r

Dispositifs médicaux +

PESE PERS CONNECT BODY PRO - 2300552337

Entrepôt Toulouse
Fournisseur : WITHINGS
N° de série : 0024E4D754DA
Livré le 07/11/2023 00:00

Détails
Reprendre
Échanger
Vendre

Dans l'onglet Dispositifs:

Sur la balance, cliquer sur les ...

Puis détails

Renseignement de l'adresse MAC

Pulse Santé - Manager

Menu Édition Facturation Développement Aide

Pulse santé

AGENCE
Oxypharm Toulouse

Tableau de bord

Prises en charge

Produit: **PESE PERS CONNECT BODY PRO - 2300552337**

WITHINGS

Observable Indisponible

Numéro de série du fabricant 0024E4D754DA

Catégorie : Nutrition

Transféré à Entrepôt Toulouse le 22/11/2023 15:16

Cycles de vie Maintenances Documents

Cycle de vie du produit

Édition d'un produit

Fournisseur

Fournisseur* WITHINGS

Modèle fournisseur* PESE PERS CONNECT BODY PRO

PRODUIT

Nom de l'équipement* PESE PERS CONNECT BODY PRO - 2300552337

Numéro de série du fabricant* 0024E4D754DA

Adresse MAC 00:24:E4:D7:54:DA

Marque* WITHINGS

Transféré à* Entrepôt Toulouse

☐ Disponible à la location

☒ Activer la téléobservance

☐ Produit rechargeable

Tag RFID

Annuler Enregistrer



Cliquer sur Modifier

Renseigner le N° MAC de la balance avec les « : » et sans espace (ex ci-contre)

Puis faire ajouter (= validation)



Remarque: aucune modification ultérieure n'est possible !! (sauf en demandant à PULSE)

Activer la téléobservance


Puis enregistrer

Appairage de la balance

Pour les diététiciennes

En amont de l'installation

- Renseigner PULSE:

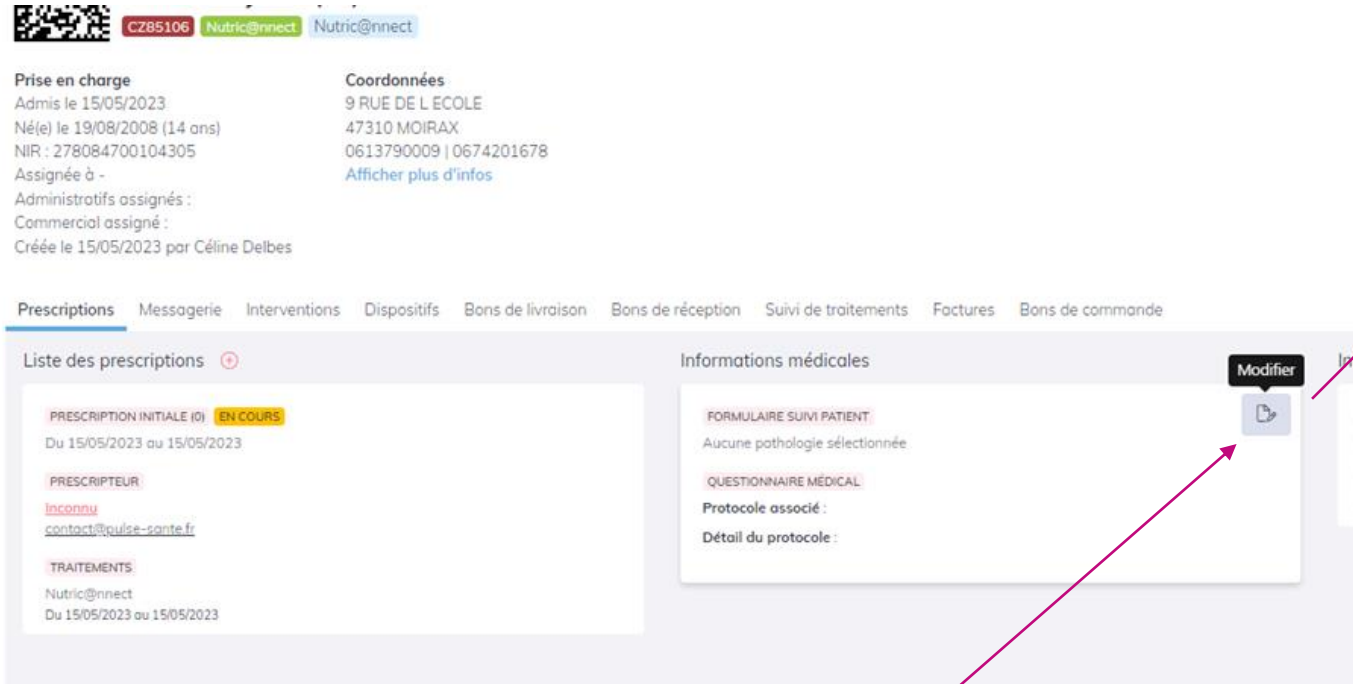

Prise en charge
Admis le 15/05/2023
Né(e) le 19/08/2008 (14 ans)
NIR : 278084700104305
Assignée à -
Administratifs assignés :
Commercial assigné :
Créée le 15/05/2023 par Céline Delbes

Coordonnées
9 RUE DE L'ECOLE
47310 MOIRAX
0613790009 | 0674201678
[Afficher plus d'infos](#)

Prescriptions | Messagerie | Interventions | Dispositifs | Bons de livraison | Bons de réception | Suivi de traitements | Factures | Bons de commande

Liste des prescriptions (+)

PRESCRIPTION INITIALE (0) **EN COURS**
Du 15/05/2023 au 15/05/2023

PRESCRIPTEUR
Inconnu
contact@pulse-sante.fr

TRAITEMENTS
Nutric@nnect
Du 15/05/2023 au 15/05/2023


Informations médicales

FORMULAIRE SUIVI PATIENT
Aucune pathologie sélectionnée.

QUESTIONNAIRE MÉDICAL
Protocole associé :
Détail du protocole :

Modifier

Renseigner les info du questionnaire médicale en cliquant sur Modifier

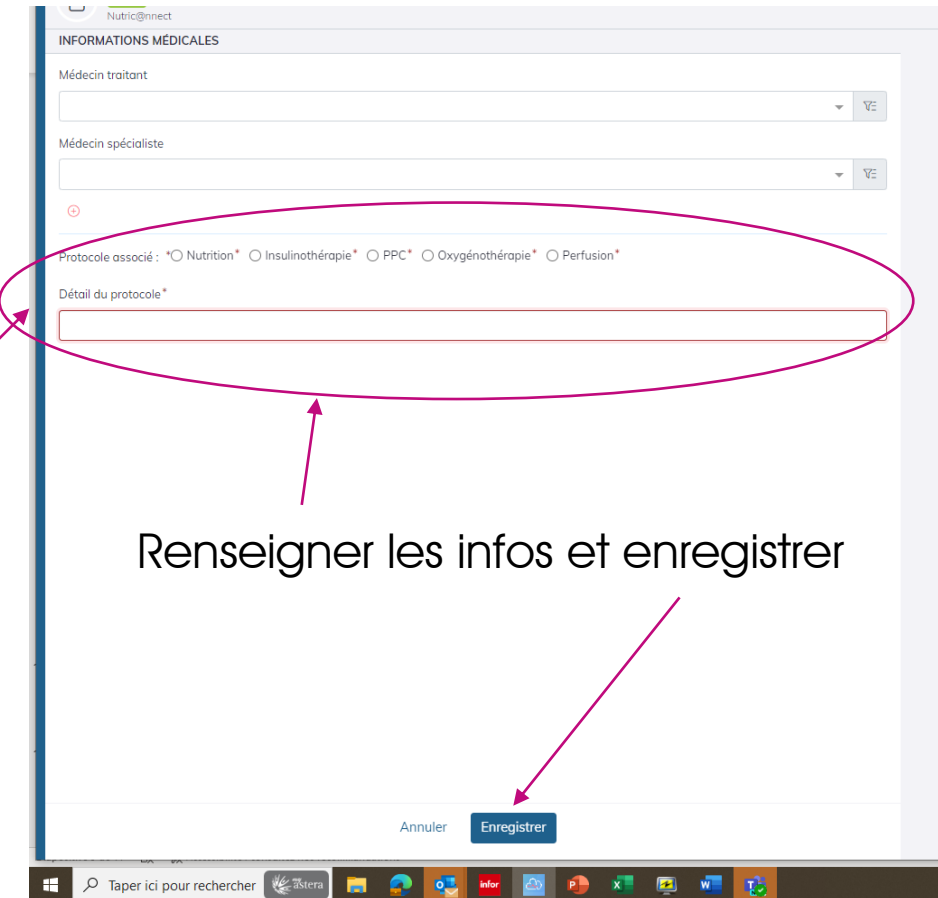

INFORMATIONS MÉDICALES

Médecin traitant
V

Médecin spécialiste
V

Protocole associé : ☐ Nutrition* ☐ Insulinothérapie* ☐ PPC* ☐ Oxygénothérapie* ☐ Perfusion*

Détail du protocole*

Renseigner les infos et enregistrer

Annuler **Enregistrer**

En amont de l'installation

Sur l'onglet Dispositifs
Cliquer sur Modifier

Pulse santé

AGENCE
Oxypharm Toulouse

Tableau de bord


Prises en charge

Planning

Commande

Logistique

Facturation


 CZ85106 Nutric@nnect Nutric@nnect


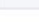
Prise en charge
Admis le 15/05/2023
Né(e) le 19/08/2008 (14 ans)
NIR : 278084700104305
Assignée à -
Administratifs assignés :
Commercial assigné :
Créée le 15/05/2023 par Céline Delbes

Coordonnées
9 RUE DE L ECOLE
47310 MOIRAX
0613790009 | 0674201678
[Afficher plus d'infos](#)

Prescriptions Messagerie Interventions **Dispositifs** Bons de livraison Bons de réception

Dispositifs médicaux

 **PESE PERS CONNECT BODY PRO - 2300527355**
Entrepôt Toulouse
Fournisseur : WITHINGS
N° de série : 0024E4D79074
Livré le 15/05/2023 00:00

Renseigner les 3
informations
demandées



Sans ces info =
pas d'appairage

Edition d'un dispositif médical

Dispositif médical*
PESE PERS CONNECT BODY PRO - 2300527355

Modèle chez le fournisseur*
PESE PERS CONNECT BODY PRO

☒ Équipement en location

À partir du*
15/05/2023

Jusqu'au

Statut
Livré

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Taille du patient (cm)*

Poids théorique de forme (kg)*

Alerte de variation de poids minimale (kg)*

ALERTE SUR LA VARIATION DE POIDS
☐ Inconnu

Annuler Enregistrer

En amont de l'installation

- Allumer la balance



Afin que la balance Withings puisse échanger ses données avec le logiciel Pulse Santé, il est nécessaire de synchroniser la balance avec Pulse Santé.

Pour cela, il suffit de faire une première pesée jusqu'à ce que le texte « PUL » s'affiche en haut à droite de l'écran de la balance. Attention cette première pesée ne sera pas enregistrée dans Pulse Santé.

Il faut ainsi faire une deuxième pesée après la synchronisation pour que l'enregistrement de la pesée s'effectue dans Pulse.

En amont de l'installation

Prises en charge

Dispositifs médicaux

PESE PERS CONNECT BODY PRO - 2300529275
Fournisseur: WITHINGS
N° de série: 0024E4FC7F28
Livré le 21/01/2024 00:00

27/10/2023 au 25/01/2024 OK

Aucune donnée d'observance à cette date

Tout est OK en
attente de pesée

Prises en charge

Dispositifs médicaux

PESE PERS CONNECT BODY PRO - 2300529275
Fournisseur: WITHINGS
N° de série: 0024E4FC7F28
Livré le 21/01/2024 00:00

27/10/2023 au 25/01/2024 OK

Aucune donnée d'observance à cette date

Problème d'apparage
vérifier les étapes
précédentes
(notamment les info
taille, poids et alerte)




L'installation peut être faite

L'installation

- Faire l'installation au domicile
- Consigne à donner au patient:
 - Sur la balance attendre la météo avant de descendre = validation de la remontée de la pesée
- Une fois la balance synchronisée, toutes les pesées effectuées s'enregistrent dans Pulse Santé.
- Attention les pesées peuvent mettre jusqu'à quelques minutes avant de s'afficher dans Pulse Santé (généralement cela prendre moins d'une minute).

Suivi du patient

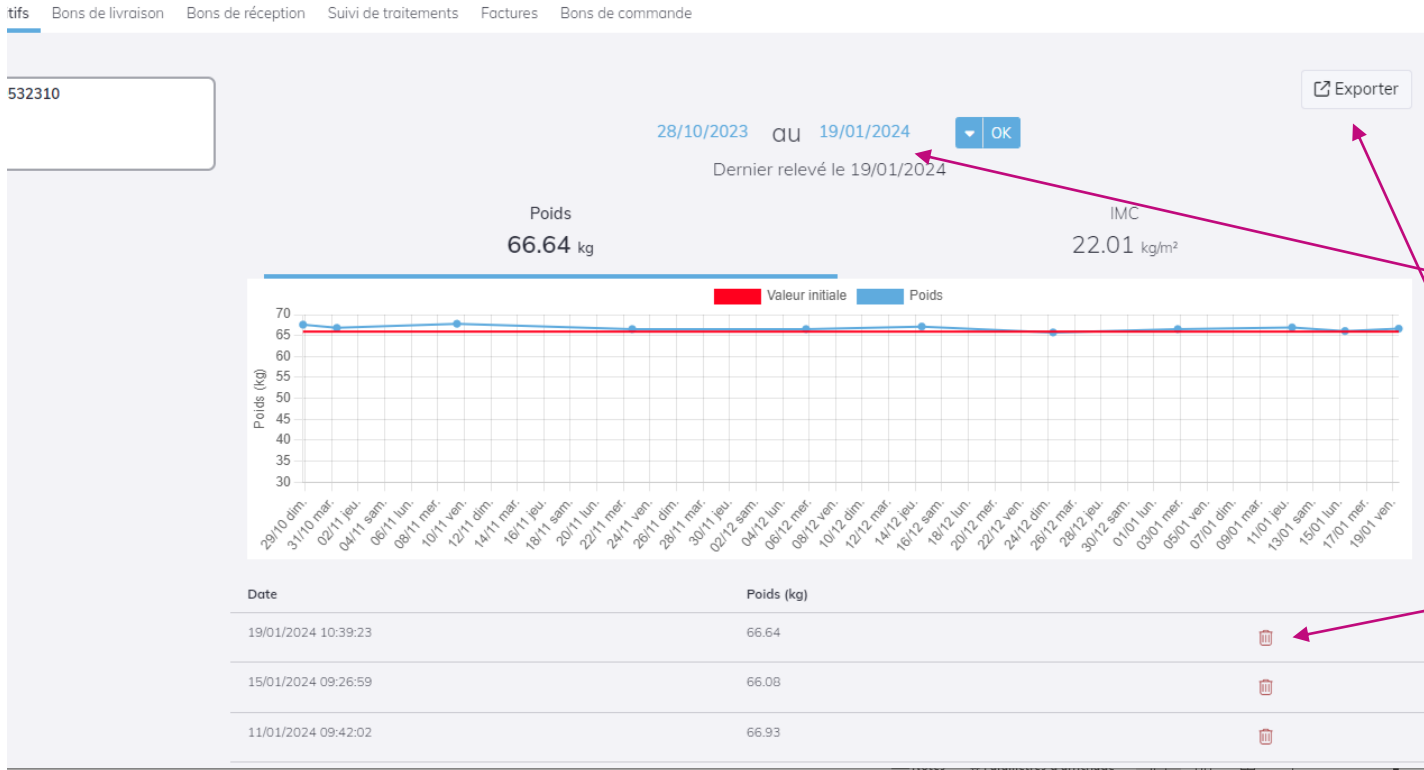

Les pesées sont consultables depuis le PC et le mobile en cliquant sur le DM. Vous pouvez également :

- Changer les dates de visualisation des pesées
- Basculer le graphique en suivi du poids ou suivi IMC
- Exporter un rapport pdf
- Supprimer un enregistrement si besoin en cliquant sur la poubelle de la ligne de pesée correspondante sous le graphique

Suivi des Alertes

Pulse Santé - Manager
Menu Édition Facturation Développement

Pulse santé

AGENCE
Oxypharm Toulouse

Tableau de bord

Prises en charge

Planning

Commande

Logistique

Facturation

Comptes clients

Qualité

Réglages

Prises en charge À surveiller (Observance) du 15/05/2023

DATE D'ADMISSION

☒ Toutes

☐ < 1 mois

☐ < 2 mois

☐ < 3 mois

☐ < 4 mois

STATUT DE L'ALERTE

☒ Toutes

☐ Alertes validées

☐ Alertes non validées

TYPES DE PRISES EN CHARGE

☐ Insulinothérapie

☒ Nutric@nnect

☐ Perfusion - Nutrition

☐ Respiratoire

RÈGLES D'ALERTE

☒ Alerte variation poids

☒ Pas d'observance sur 1 semaine

☒ Usage entre 2h et 4H sur 1 mois

☒ Usage < 2h sur 1 mois

☒ Usage = 0h sur 15 jours

☒ IAH > 10 (moy. 2 semaines)

☒ Fuites importantes (>50L/min) sur 15j

ASSIGNÉ

CODE POSTAL

Tout afficher

| Q. Code | Q. Nom du patient | Q. Traitements | Code postal | Assigné | Nombre d'alertes |
|---------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------|--|
| A | RETEST Nutricconnect | Nutric@nnect Nutric@nnect | | Céline Delbes | 1 alerte(s) Pas d'observance sur 1 semaine Pas d'observance sur 1 semaine : true |

Cliquer sur la prise en charge concernée

Sélectionner le filtre Nutricconnect

Les alertes sont à consulter régulièrement minimum 1/sem

Gestion des alertes

Pulse Santé - Manager
Menu Édition Facturation Développement

Pulse santé

AGENCE
Oxypharm Toulouse

Tableau de bord
Prises en charge
Planning
Commande
Logistique
Facturation
Comptes clients
Qualité
Réglages

RETEST Nutriconnect (M.)
Prise en charge
Admis le 13/03/2023
Né(e) le 01/01/1960 (63 ans)
Assignée à Céline Delbes
Administratifs assignés :
Commercial assigné :
Créée le 27/03/2023 par Céline Delbes

Coordonnées
Pas d'adresse d'intervention
Afficher plus d'infos

Alertes d'observance
1
15/05/2023
Pas d'observance sur 1 semaine

Prescriptions
Liste des prescriptions
PRESCRIPTION INITIALE (0) **EN COURS**
Du 13/03/2023 au 10/06/2023
PRESCRIPTEUR
COADOU ISABELLE
Professionnel : 05.61.83.10.00
Fax : 05.62.18.32.06
TRAITEMENTS
Nutric@nnect
Du 13/03/2023 au 10/06/2023

Informations médicales
FORMULAIRE SUIVI PATIENT
Aucune pathologie sélectionnée
QUESTIONNAIRE MÉDICAL
Protocole associé : Nutrition
Détail du protocole : 2x 500ml NUTR

Cliquer sur l'alerte

Historique des alertes

Valider toutes les alertes

25/01/2024
Valider les alertes du jour
Pas d'observance sur 1 semaine
Pas d'observance sur 1 semaine : true

24/01/2024
Valider les alertes du jour
Pas d'observance sur 1 semaine
Pas d'observance sur 1 semaine : true

23/01/2024
Valider les alertes du jour
Commentaire optionnel ☒

22/01/2024
Pas d'observance sur 1 semaine
Pas d'observance sur 1 semaine : true

21/01/2024
Pas d'observance sur 1 semaine
Pas d'observance sur 1 semaine : true

20/01/2024
Pas d'observance sur 1 semaine
Pas d'observance sur 1 semaine : true

19/01/2024
Pas d'observance sur 1 semaine
Pas d'observance sur 1 semaine : true

18/01/2024

☒ Alertes d'observance activées

Fermer

Cliquer sur Validez les alertes du jour ou valider toutes les alertes s'il y en a plusieurs liées

Renseigner l'action menée puis valider

